

cuiro sa

Distribution de produits pour ergo/physiothérapeute e l'orthopédie – Vertrieb von ergo-, physiotherapeutischen und orthopädischen Produkten
Av. Ruchonnet 2 bis – CH-1003 Lausanne – Tél. 021 312 15 15 – Fax 021 320 50 68 office@cuiro.ch – www.cuiro.ch



Was ist THERMOSKIN?

Bei den *Thermoskin/Trioxon*-Produkten (beides eingetragene Marken) handelt es sich um halbflexible Stützen mit dem Vorteil des integrierten Wärmespeichers.

Diese hochwertigen Produkte bestehen aus drei Materialschichten:


Die äussere aus Nylon, dadurch strapazierbar und Schutz bietend beim Tragen.

Die mittlere aus nicht porösem gummiertem Material, bietet Unterstützung und Kompression und hält, in Verbindung mit der inneren Schicht, die Körperwärme stabil.

Die innere (körperanliegende Seite) ist aus *Trioxon*, dem einzigartigen dreidimensionalen Gewebe, welches hilft, ein für die Heilung notwendiges Thermo-Klima, herzustellen. *Trioxon* ermöglicht der Haut zu atmen und die überflüssige Feuchtigkeit zu entfernen.

Richtige Ventilation minimiert Entzündungen und bewirkt einen langfristigen Tragekomfort!

Trioxon®

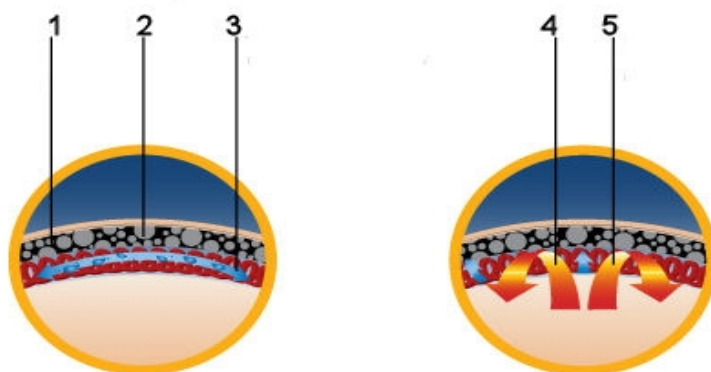

1 Kompression und Halt 2 Luftzirkulation 3 Feuchtigkeitsabtransport 4 Sorgt für bequemes Tragen
5 Konstante Körperwärme, verbesserte Durchblutung, Anstieg der Unterhauttemperatur um 1-2 Grad

Im inneren des Produktes geschieht folgendes:

Kleine Fasern saugen die Feuchtigkeit von der Haut. Der Strickvorgang schliesst Luft im Gewebe ein. Durch die Spiralstruktur von *Trioxon* wird die Feuchtigkeit von der Haut entfernt, die Luft kann innerhalb der Innenschicht zirkulieren und schützt so vor übermässigem Schwitzen. So entsteht ein Mikroklima, das die Atmung der Haut anregt.

Es ist klinisch bewiesen, dass sich die subkutane Hauttemperatur, also die Fett- und Gewebeschichten direkt unter der Haut, dank diesen thermischen Produkten um 1-2 Grad erhöht, was an der verletzten Struktur zu einer spürbar verbesserten Stoffwechselsituation führt. Als Folge davon wird der Heilungsprozess beschleunigt.

Thermoskin/Trioxon-Produkte sind in Zusammenarbeit mit dem Australien Institute of Sport (AIS) und der Australien Physiotherapy Association (APA) entstanden, die die Entwicklung neuer und innovativer Produkte zur Prävention, Behandlung und Rehabilitation von Sportverletzungen, Arthritis und Muskelverletzungen einschliesst. *Thermoskin/Trioxon*-Produkte sind wie folgt einsetzbar:

In der Prävention (Prophylaxe)
In der Behandlung (Therapiebegleitend)
In der Rehabilitation und Regeneration.

Allerdings sollten die Produkte erst ca. 48 Stunden nach einem Trauma, einer Verletzung oder einem Unfall eingesetzt werden, sobald die ersten Aktionen wie Ruhigstellen, Eis/Kühlung, Kompression und Hochlagern abgeschlossen wurden.



bei

cuiro sa